

ユニコ鍼灸用品カタログ

UNICO PRODUCT CATALOG



鍼

より技術の幅を広げていただくために、ユニコからの提案「六角鍼管」。
面で指先に接するため保持しやすく、片手挿管もおこないやすい形状になっています。



鍼体と鍼柄はステンレス製。


材質を同じにすることで運鍼時の繊細な感覚が術者の指に正確に伝わります。
また、灸頭鍼としてもご利用いただけます。

鍼先は刺入しやすく痛みが少ない松葉型。

挿入のしやすさ、患者様の切皮痛の軽減を考えた結果、松葉型に近い、なだらかなカーブ（30～35度）をユニコ鍼の基準にしております。

持ちやすい六角鍼管。

- 指先にフィットする形
- 転がりにくい
- 皮膚との接触面は丸く加工済
- 内径が小さく、刺入時のブレを防ぐ

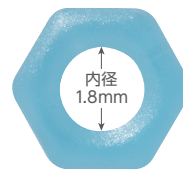

ユニコディスポ鍼 P_o / P_o8_p / P-C

管理医療機器 単回使用 滅菌済

筋肉の変化をしっかりとらえる。
ユニコ鍼のスタンダードのシリコンフリータイプ。

- 鍼体：材質/ステンレス



ユニコディスポ鍼 Pro

- 鍼柄：材質/ステンレス長さ 20mm 直径 1.2mm
- 鍼管：六角鍼管
- 入数：100本入（個包装）



ユニコディスポ鍼 Pro8

- 鍼柄：材質/ステンレス長さ 20mm 直径 1.2mm
- 鍼管：六角鍼管
- 入数：240本入（鍼8本と鍼管1本でセット）

ユニコディスポ鍼 S / S8_p / S-C

管理医療機器 単回使用 滅菌済

刺入時の抵抗が少なく、なめらか刺入のシリコンタイプ。

- 鍼体：材質/ステンレス（コーティング加工 鍼先より15mm）



ユニコディスポ鍼 S

- 鍼柄：材質/ステンレス長さ 20mm 直径 1.2mm
- 鍼管：六角鍼管
- 入数：100本入（個包装）



ユニコディスポ鍼 S8

- 鍼柄：材質/ステンレス長さ 20mm 直径 1.2mm
- 鍼管：六角鍼管
- 入数：240本入（鍼8本と鍼管1本でセット）

鉗管から鉗柄が片手で簡単に取り外し可能なワンプッシュタイプ。



ユニコディスポ鉗 Pro-C

- 鉗柄：材質／ステンレス長さ 20mm 直径 1.2mm
- 鉗管：六角鉗管
- 入数：100本入（個包装）



ユニコディスポ鉗 S-C

- 鉗柄：材質／ステンレス長さ 20mm 直径 1.2mm
- 鉗管：六角鉗管
- 入数：100本入（個包装）



一体型六角鉗管は、鉗管内側に鉗を固定。クサビがないのでゴミが出ません。

本商品は単回使用（一部位一刺鉗）を想定した商品です。再挿管では鉗管内で鉗柄が引っ掛かることがあります。再挿管を前提とされる場合はディスポ鉗Pro（クサビあり）をご使用ください。

ユニコディスポ鉗 Pro・Pro8 / S・S8

番号 (mm)	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)
#00 (0.12)	アイボリー	○	○	—	—
#0 (0.14)	グリーン	○	○	○	—
#1 (0.16)	レッド	○	○	○	—
#2 (0.18)	グレー	○	○	○	—
#3 (0.20)	ブルー	○	○	○	○
#4 (0.22)	ピンク	①	○	○	—
#5 (0.24)	イエロー	○	○	○	○
#8 (0.30)	パープル	—	—	㊦	○
#10 (0.34)	グリーン	—	—	㊦	—
#13 (0.40)	ブルー	—	—	㊦	—
#15 (0.45)	イエロー	—	—	㊦	—

① = Pro1P/S1Pのみ製造。㊦ = Pro8P/S8Pのみ製造。
㊦ = Pro8Pのみ製造。鉗体は52mmです。


ユニコディスポ鉗 Pro-C / S-C

番号 (mm)	カラー	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)
#0 (0.14)	グリーン	○	○	—	—
#1 (0.16)	レッド	○	○	○	—
#2 (0.18)	グレー	○	○	○	—
#3 (0.20)	ブルー	○	○	○	○
#5 (0.24)	イエロー	—	○	○	○
#8 (0.30)	パープル	—	—	—	○



定番品の Pro と S に太い番手が誕生！ ※製造ロットの事情により販売価格が通常品と異なります。

Pro8 #13(0.40) だけの特長

弾入深度 8mm の特別仕様

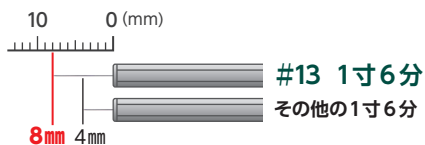

鉗体は 52mm

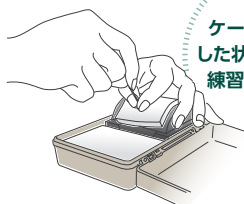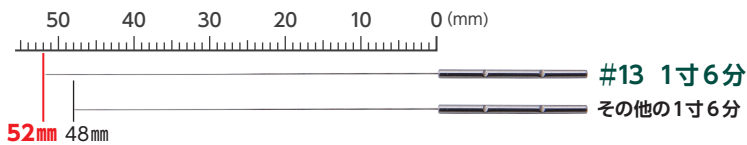


ケースにセットした状態で直ぐに練習できます！

ユニコ 刺鉗練習台 VII型


刺鉗の技術の習得と、刺鉗部位の状態を探る感覚を養うための練習器です。

- 人体の組織を想定した4硬度のゲルに刺すことで刺入感覚を習得します。
- 蓋を開ければ直ぐに練習できるコンパクト設計です。

内容

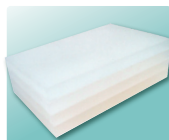

1.ゲル体×4層 (ステレン樹脂微粒/パウダー無毒)

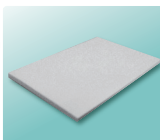


2.硬質ゴムシート



3.穴あきシート(2枚)



4.シート・薄紙

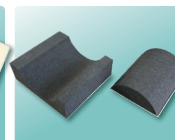

5.発泡ポリエチレンマット (抗菌)



※色のご指定はできません



ユニコBT鍼 *~Beauty Therapy~*



管理医療機器 単回使用 滅菌済

— ユニコから鍼管付きの短鍼が誕生 —

#00(0.12)

#01(0.16)

#03(0.20)

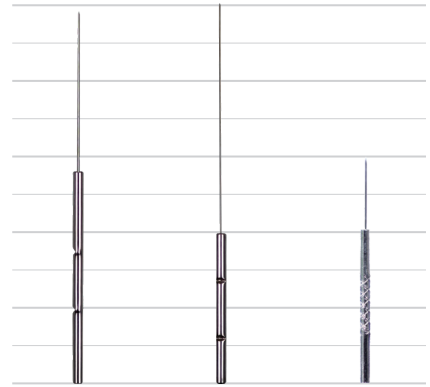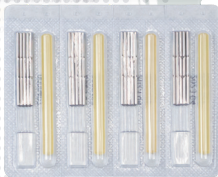

〈原寸イメージ〉

- 鍼柄：材質/ステンレス長さ 28mm 直径 1.2mm
- 鍼体：材質/ステンレス
- 鍼管：六角鍼管
- 入数：1箱/5本パック×40入 (200本)

BT鍼 Pro1P 美容鍼

鍼体：21mm 鍼体：30mm 鍼体：10mm
鍼柄：28mm 鍼柄：20mm 鍼柄：20mm




鍼先 松葉型に近いなだらかなカーブ

ユニコ鍼基準の松葉型 (30 ~ 35度) を採用し刺入のしやすさ、鍼先の感覚が手に伝わりやすいように。




鍼体 長さ21mmの7分鍼

太さ 0.12、0.16、0.20 の3種類。お身体はもちろんお顔への施術にもご利用いただけます。

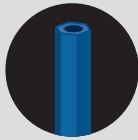

鍼管 ユニコ鍼の特徴 六角鍼管

鍼灸師の皆様から多くお声を頂き鍼管付きの短鍼に、1寸に使用する鍼管を使用し短鍼だけ扱いやすいを実現。

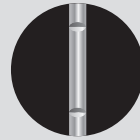

鍼柄 28mmの長柄タイプ

指全体で鍼柄を保持し繊細な刺鍼テクニックが可能に。片手挿管もしやすく安心感、安定感のある鍼柄に。

とらえた「点」を狙う!

鍼ブレ最小限を実現した内径約1.5mmの極細鍼管




ユニコディスポ鍼 XS細鍼管Pro


管理医療機器 単回使用 滅菌済

- 鍼柄：材質/ステンレス 長さ/直径1.2mm
- 鍼管：細鍼管 カテゴリー：Pro
- 入数：100本入(個包装) 番手：1番1寸3分のみ

鍼管は極細設計

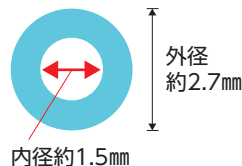

鍼管断面は丸く加工

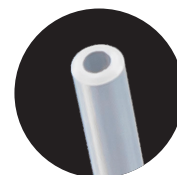

管理医療機器 単回使用 滅菌済



ユニコディスポ鍼 美容鍼

ステンレス鍼 | 鍼管なし

こころに響く、技と鍼



刺鍼の多くなる美容鍼灸のために…
便利な240本入り。

美容鍼 | Pro

鍼先の感覚を重視する
Proタイプ



美容鍼 | S

切皮痛を抑える
Sタイプ (コーティング加工)



片手での中国式刺鍼手技を前提に鍼管を無くし、すばやく打てるようにしました。
トラブル防止と使いやすさを考えて 鍼を、細く・短く・軽くしました。



鍼先 | 鍼先は卵型に近い形状

- 皮下出血などのトラブルを軽減し、施術者に鍼先の感覚が伝わりやすくなりました。



鍼体 | 細くて短い鍼体

- 長さ10mm、太さ0.12~0.18mm。
- 神経や血管を傷つけないことを考慮しています。



鍼柄 | 軽い鍼柄

- アルミ製鍼柄なので鍼がたわみません。
- キザミ加工で手の滑りを抑えます。



鍼管 | 合理的な施術

- 横刺、斜刺ができます。
- 鍼管を使わないので、すばやく、たくさん打てます。

番手	#00(0.12)	#0(0.14)	#1(0.16)	#2(0.18)
Pro	○	○	○	○
S	○	○	○	—

- 鍼柄：材質/アルミ 長さ20mm
- 鍼体：材質/ステンレス 長さ3分(10mm)
- 入数：4本パック×60入(240本)

一般医療機器 再使用可

ユニコST鍼

高圧滅菌可能。

- 鍼柄：材質/ステンレス 長さ20mm
- 鍼体：材質/ステンレス
- 入数：1箱(70本入り)



一般医療機器 再使用可

ユニコST鍼長柄

高圧滅菌可能。灸頭鍼等に最適。

- 鍼柄：材質/ステンレス 長さ25mm
- 鍼体：材質/ステンレス
- 入数：1箱(70本入り)

管理医療機器 単回使用 滅菌済

ユニコディスポ鍼 K-II 型

押手は常に鍼管を保持し、刺手は長い鍼柄をもって手技をおこなうため、鍼体に直接触れることが無いクリーンニードルテクニックです。

- 鍼柄：材質/ステンレス 長さ71mm
- 鍼体：材質/ステンレス 長さ48mm
- 鍼管：鍼管/73mm/外径4.4mm ライン入り
- 入数：1箱(100本入り)
- 番手：#3番1寸6分、#5番1寸6分

ユニコST鍼 / ST鍼長柄

番手 (mm)	5分 (15mm)	1寸 (30mm)	1寸3分 (39mm)	1寸6分 (48mm)	2寸 (60mm)	2寸5分 (75mm)
#0 (0.14)	○	○	○	○	○	—
#1 (0.16)	○	○	○	○	—	—
#2 (0.18)	○	○	○	○	○	—
#3 (0.20)	—	○	●	●	○	○
#4 (0.22)	—	○	●	●	○	—
#5 (0.24)	—	○	●	●	○	○
#6 (0.26)	—	○	○	○	○	—
#7 (0.28)	—	—	○	○	○	○
#8 (0.30)	—	○	○	○	○	○
#10 (0.34)	—	○	○	○	○	○

※ST鍼長柄は、●印のみ製造しております。

皮内鍼

治療効果の持続に。貼付部位や使用感により選んでいただけるよう種類を豊富に取り揃えております。



治療院様の使用例

1. 顔面神経麻痺の方に

痛点到貼付すると痛みが緩和した例があります。

2. 治療効果の持続に

患者様の次回来院まで治療効果を持続させます。

3. こむら返りの予防に

承筋などに貼付することで予防効果があります。

4. ぎっくり腰の方に


左の腰に痛みがある場合でも右の腰や脊柱にも貼付すると効果があります。

5. 乗り物酔い止めに

内関に貼付すると、予防に役立ちます。

磁気皮内鍼

管理医療機器 単回使用

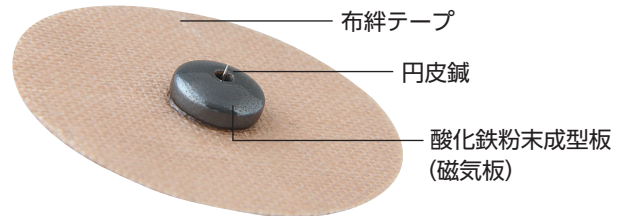

ユニコバンN

N極の磁気板使用。
磁気板内より鍼を出した安心タイプ。


- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1、2.1mm
- 磁石外径：5.5mm
- 布絆：23.0×21.0mm (楕円形)
- 入数：各10本×10シート入/箱



ユニコバンS

S極の磁気板使用。
磁気板内より鍼を出した安心タイプ。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1mm
- 磁石外径：5.5mm
- 布絆：23.0×21.0mm (楕円形)
- 入数：10本×10シート入/箱

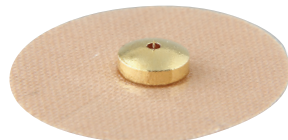

ユニコバンG

24金メッキ円皮鍼・磁気板と布絆を組み合わせた鍼治療器具。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1mm
- 磁石外径：5.5mm
- 布絆：23.0×21.0mm (楕円形)
- 入数：10本×10シート入/箱



ユニコエスピーバン

磁気板の押圧効果と円皮鍼による鍼治療としての効果が得られます。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1mm
- 磁石外径：5.5mm
- 布絆：23.0×21.0mm (楕円形)
- 入数：10本入




ユニコエスピーバンG

エスピーバンGは、円皮鍼に24金メッキを使用しており、なめらかな刺入と治療が可能。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1mm
- 磁石外径：5.5mm
- 布絆：23.0×21.0mm (楕円形)
- 入数：10本入

粒鍼

家庭用永久磁石磁気治療器 管理医療機器 単回使用

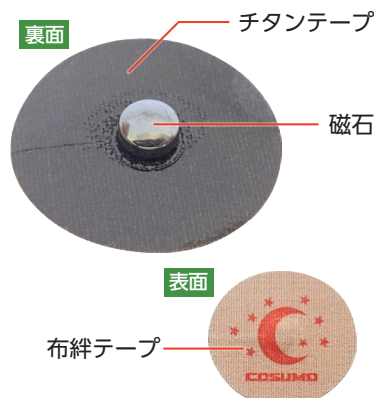

ユニコ磁気バン

- 磁石の厚み：約3mm
- 布絆：23×20mm (楕円形)
- 入数：6枚×20シート入

- ・永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。
- ・裏面：粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え、心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復を図ります。




ユニコ磁気バン
90mT N
N極タイプ
入数：6枚×20シート入



ユニコ磁気バン
90mT S
S極タイプ
入数：6枚×20シート入



ユニコ磁気バン
200mT N
N極タイプ
入数：6枚×20シート入

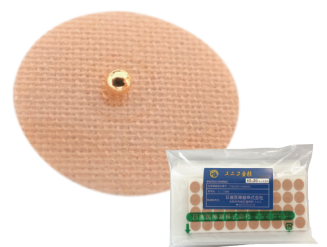

ユニコ金粒

生球金メッキ。

- 金粒外径：1.5mm
- 布絆：12.0×11.0mm (楕円形)
- 入数：40枚×20シート入



ユニコ インピシンA21G

円皮鍼を両面から貼り合わせたダブル安全タイプ。24金メッキ円皮鍼。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.0mm
- リング外径：2.3mm
- 不織布粘着テープ：16.0mm×16.0mm
- 入数：21本入



ユニコ インピシンB20

円皮鍼と布絆を組み合わせた鍼治療器具。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1、1.3、1.5、2.1mm
- リング外径：2.6mm
- 布絆：直径14.0mm（円形）
- 入数：各20本入
- ※鍼長1.1mmはリング外径2.0mmもご用意



ユニコ インピシンB40

円皮鍼と布絆を組み合わせた鍼治療器具。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1、1.3、1.5、2.1mm
- リング外径：2.6mm
- 布絆：12.0×11.0mm（楕円形）
- 入数：各40本入
- ※鍼長1.1mmはリング外径2.0mmもご用意



ユニコ インピシンB20G

24金メッキ円皮鍼と布絆を組み合わせた鍼治療器具。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1mm
- リング外径：2.6mm
- 布絆：直径14.0mm（円形）
- 入数：20本入



ユニコ インピシンC40

円皮鍼に不織布の絆創膏を組み合わせた鍼治療器具。

- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1mm
- リング外径：2.6mm
- 不織布粘着テープ：11.0mm×13.0mm
- 入数：40本入



一般医療機器 再使用可

ユニコ 平軸皮内鍼

鍼先保護材に刺し、コンパクトなケースに収納しています。

- 線径：0.14mm
- 鍼長：3.0、5.0mm
- 入数：各50本ケース入
- 線径：0.16mm
- 鍼長：3.0、4.0、5.0、6.0、7.0mm
- 入数：各50本ケース入



一般医療機器 再使用可

ユニコ リング皮内鍼

鍼先保護材に刺し、コンパクトなケースに収納しています。

- 線径：0.16mm
- 鍼長：3.0、4.0、5.0、6.0、7.0mm
- 入数：各50本ケース入



管理医療機器 単回使用

ユニコ 円皮鍼

鍼先保護材に刺し、コンパクトなケースに収納しています。


- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1mm
- リング外径：2.0mm
- 入数：50本ケース入
- 線径：0.22mm
- 鍼長：1.1、1.3、1.5、2.1mm
- リング外径：2.6mm
- 入数：各50本ケース入

商品特長

- 1 台座が大きいので、一人でもかんたんに扱えます。
- 2 もぐさの大きいので、たくさん据える必要がなく、1仕でも温灸効果が長続きます。
- 3 温熱範囲が広いので、正確な位置が分からなくてもツボを確実に刺激します。
- 4 台座の通気穴からよもぎ成分を含んだ温熱がツボに浸透します。

もぐさと台座が
大きくて
使いやすい

遠赤外線の内熱効果がツボの深層部まで浸透します。

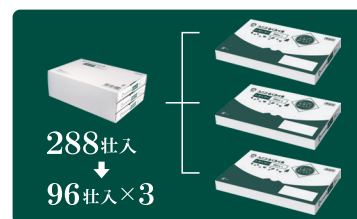


96 仕単位で患者様に販売できます。

ユニコらくらく灸 ハード (業務用)

強力な熱さを好まれる方、レギュラーでは、物足りない方。


- もぐさ直径：約11mm
- 高さ：15mm (台座含む)
- 台座：約 20mm× 約 20mm
- 入数：業務用 288 仕入 (96 仕入×3)
- 燃焼時間：7～8分、設定温度：59～63度
(※室内の温度設定約25℃の場合)

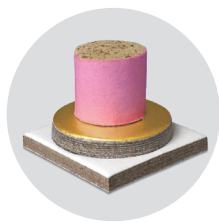

ユニコらくらく灸 レギュラー (業務用)

お灸に慣れている方、しっかりとした熱さを好まれる方。



- もぐさ直径：約10mm
- 高さ：15mm (台座含む)
- 台座：約 20mm× 約 20mm
- 入数：業務用 288 仕入 (96 仕入×3)
- 燃焼時間：7～8分、設定温度：57～60度
(※室内の温度設定約25℃の場合)

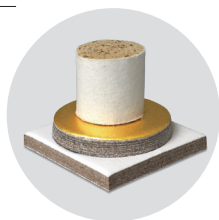

ユニコらくらく灸 ソフト (業務用)

初めてお灸をされる方、女性の方、敏感肌の方。

- もぐさ直径：約8mm
- 高さ：15mm (台座含む)
- 台座：約 20mm× 約 20mm
- 入数：業務用 288 仕入 (96 仕入×3)
- 燃焼時間：6～7分、設定温度：49～53度
(※室内の温度設定約25℃の場合)

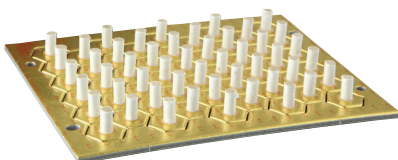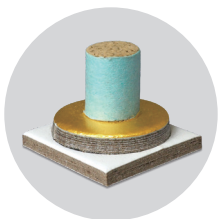

ユニコ長生灸

点灸タイプのスタンダードな台座間接灸。
調熱絆 22 枚付。

- 入数：200 仕入
- 設定温度：約 58 度 (レギュラー)


テーピング



スポーツテーピングテープ

ZERO TAPE

HIGHQUALITY SPORTS TAPING SERIES

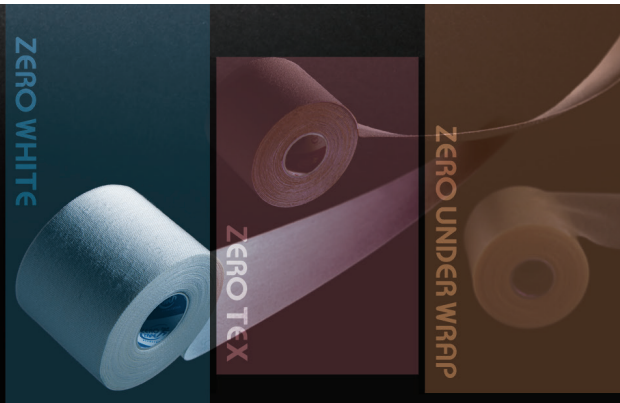


筋肉や関節の動きをサポートする伸縮テープや、固定用スポーツテープ、伸縮スポーツテープ等、スポーツや日常の捻挫、肉離れ、再発防止などに。

ZEROホワイトテープ非伸縮

- ・伸縮性のない固定用のテーピングテープです。関節や筋肉の過度の動きを制限し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用するためのテープです。
- ・アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
- ・手切れしやすい加工。
- ・通気性を保つドット粘着面加工。

- 12mm×13.75m 12巻入
- 25mm×13.75m 12巻入
- 38mm×13.75m 12巻入
- 50mm×13.75m 12巻入

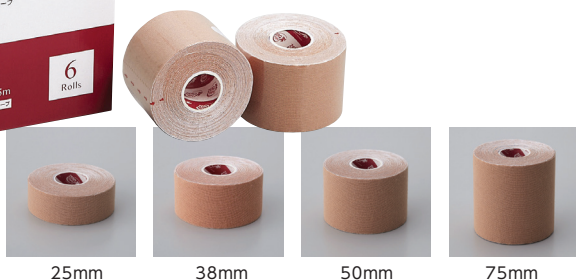

ZEROテックス (キネシオ)

- ・筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングテープです。
- ・伸縮性、通気性に優れています。
- ・低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。

- 25mm×5m 12巻入
- 38mm×5m 8巻入
- 50mm×5m 6巻入
- 75mm×5m 4巻入

ZEROアンダーラップテープ

- ・皮膚保護を目的とした非粘着テープのテーピングです。
- ・厚みは0.65mmの扱いやすい薄さ。
- ・テーピング前に皮膚に直接巻くことで剥離時の痛みを防ぎ、皮膚への刺激をやわらげます。
- ・特に皮膚の弱い方や体毛の多い方、テーピング頻度の高い方に適しています。

- 70mm×27m 12巻入




サポーター

日常生活での負傷、スポーツ時のケガ予防や再発防止等、痛みの軽減に役立つよう部位、体型に応じたサイズ展開を取り揃えています。

エルモ 医療サポーター 〈薄手タイプ〉

医療サポーター／薄手タイプの特長

- ・保温性に優れ、汗をかいてもサラッとした肌触りの快適保温繊維を肌面に使用。
ドライ&ウォーム効果で長時間の使用でも肌面を快適な状態に保ちます。
- ・遠赤糸を編み込み、保温効果をさらに高めました。
- ・圧迫感の少ないソフトな締め心地。

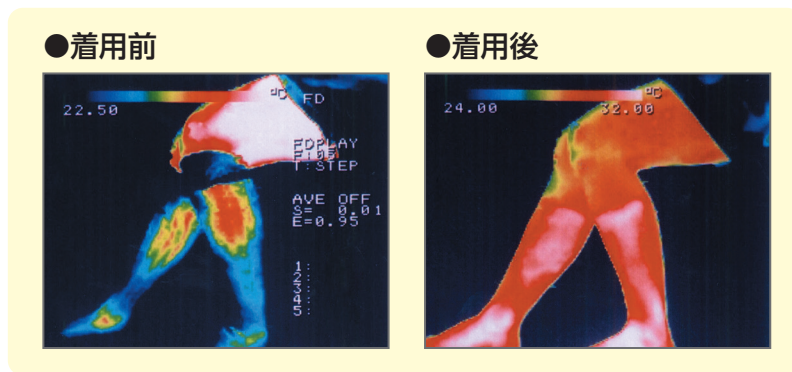

製品ラインナップ

- ひじ／M・L
 - ひざ／M・L・LL
 - 足首／フリー
 - 手のひら／フリー
 - ふくらはぎ／フリー
 - 太もも／フリー
- 入数：各1枚入
-
- 手首／フリー 入数：各2枚入



サポーター サイズ表 ※矢印部分を計測してください

エルモ 医療サポーター 〈薄手タイプ〉

	ひじ		ひざ				足首	手のひら	手首	ふくらはぎ	太もも
サイズの測り方											
適応サイズ	M	L	M	L	LL	3L	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー
周径 (cm)	21~33	25~40	29~46	34~50	37~60	41~70	19~33	18~30	16~30	25~40	34~50

治療補助用品

治療補助にもご利用していただける商品です。

ユニコ ひざポカホットゲル (チューブ入)

- ・グルコサミン、コンドロイチン、MSM を配合した温感タイプのマッサージゲルです。
- ・ひざ、腰などにまんべんなく塗ってマッサージすることで、血行を促進し、あったか成分が約2～3時間持続します。
(※個人差があります)

●容量：100g

ユニコ ひざポカホットゲル (ポンプ式ボトル入)

- ・業務用 ポンプ式ボトル入

●容量：300ml



※カプサイシン(トウガラシエキス)は使っておりませんので、ピリピリとした刺激感はありません。

ユニコ よもぎシリーズ

世界各地で様々な異名を持つ「よもぎ」を扱い製造をおこなったユニコよもぎシリーズの製品を是非一度お試しください。

よもぎ

学名	アルテミシア属(ギリシア神話の女性の健康の守護神の名より)		
異名	フランス	エイブ・ロワイヤル(王の草)	アイヌ:カムイ・ノヤ(神の草)
	中国	医草/愛の草	韓国:やせるお茶

- 成分：精油成分：シネオール、ツジヨン、セスキテルペン
 ビタミン類：ビタミンA(カロチン)・B1・B2・C
 ミネラル類：鉄、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウム
 酵素：アミラーゼ、インペルターゼ、リジン等 13種類
 葉緑素：クロロフィル
 その他：アデニン、コリン、タンニン、食物繊維

■よもぎの効能

老人性皮膚掻痒症、アトピー性皮膚炎、腰痛、打身、こしけ、鼻血、子宮出血、冷え性、痔、便秘、下痢、虫さされ、切り傷、ニキビ、吹き出物、神経痛、慢性皮膚病、腹痛



ユニコソープ

- ・吹き出物等がある肌に刺激を与えないやさしい石鹸です。
 - ・ヨモギエキス、シソエキス配合。
- 容量：100g



よもぎの温もり

- ・冷え性の方・乾燥肌によるかゆみ・肩こり・腰痛にお悩みの方に大変おすすめです。
 - ・ヨモギ軟エキス5%含有
- 容量：20g×30包入 医薬部外品

信頼と安心

確かな品質

顧客の要望に応える

 **日進医療器株式会社**
鍼灸・柔整部



ユニコネット

<https://www.unico-net.jp/>



〒541-0045 大阪市中央区道修町1-4-2

TEL.06-6223-1781 FAX.06-6223-1567

✉ E-Mail info@unico-net.jp

価格についてご質問など、お気軽にお問合せください。



0120-993-118